


# 子宮頸部 細胞採取器具

監修：公益財団法人東京都予防医学協会 常任学術顧問  
国立病院機構栃木医療センター名誉院長  
医学博士 長谷川 壽彦 先生

## サーベックスブラシ™ 滅菌 / 未滅菌 <sup>注 1)</sup>



※妊娠 10 週目以降の妊婦には使用しないでください

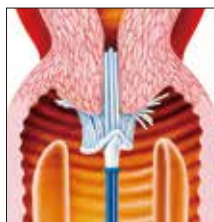

SCJ<sup>\*1</sup>を中心とした子宮腔部  
および子宮頸管入り口


- ① 子宮頸管部にサーベックスブラシ™ 滅菌 / 未滅菌の中心を挿入します。
- ② ブラシの肩部を子宮口に**軽く**押し当ててから**時計方向に 5 回転**させてください。
- ③ サーベックスブラシ™ 滅菌 / 未滅菌を静かに抜き取ってください。

<sup>\*1</sup> Squamo-columnar junction; 扁平円柱上皮接合部

## サーベックスブラシコンビ™ 滅菌 / 未滅菌 <sup>注 3)</sup>



※妊娠中の婦人には使用しないでください

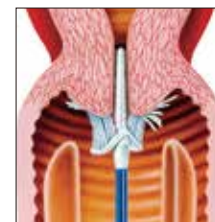


子宮頸管から子宮腔部まで  
同時に採取

- ① 子宮頸管部にサーベックスブラシコンビ™ 滅菌 / 未滅菌の中心を挿入します。
- ② ブラシの肩部を子宮口に**軽く**押し当ててから**時計方向に 2 回転**させてください。
- ③ サーベックスブラシコンビ™ 滅菌 / 未滅菌を静かに抜き取ってください。

## エンドサーベックスブラシ™ 標準タイプ滅菌 <sup>注 2)</sup>



※妊娠中の婦人には使用しないでください

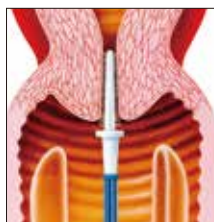

子宮頸管

- ① 子宮頸管部にエンドサーベックスブラシ™ 滅菌を安全リング手前まで挿入します。
- ② **時計方向に 1 回転**させてください。
- ③ エンドサーベックスブラシ™ 滅菌を静かに抜き取ってください。

## エンドサーベックスブラシ™ S タイプ滅菌 <sup>注 2)</sup>



※妊娠中の婦人には使用しないでください

操作方法はエンドサーベックスブラシ™ 標準タイプ  
滅菌を参照してください。

### 使用上の注意

- ・ 使用の際は取扱説明書を必ずご参照ください。
- ・ 再使用禁止。
- ・ 細胞を採取する際に腔部への潤滑クリーム等の使用は避けてください。

注 1) 製造販売届出番号：07B1X00003000117 販売名：サーベックスブラシ

注 2) 製造販売届出番号：07B1X00003000119 販売名：エンドサーベックスブラシ

注 3) 製造販売届出番号：07B1X00003000118 販売名：サーベックスブラシコンビ

# 子宮頸部 細胞採取方法

監修：公益財団法人東京都予防医学協会 常任学術顧問  
国立病院機構栃木医療センター名誉院長  
医学博士 長谷川 壽彦 先生

## 採取時のお願い

採取部位が粘液や帯下で覆われている場合は  
シリンジで頸管部を吸引し、表面を綿球などで拭って  
**粘液や帯下を取り除いてから**  
細胞を採取してください。




細胞を的確に採取するため採取前に多少出血する  
旨を受診者に説明してください。

## ブラシ操作

サーベックスブラシ™ 滅菌 / 未滅菌・  
サーベックスブラシコンビ™ 滅菌 / 未滅菌




ブラシが半円弧状となっており**時計方向**に回転さ  
せることにより的確に細胞を採取します。

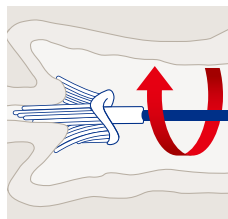

ブラシは弾力性がありま  
すので軽く押し当てるだ  
けで十分な細胞量がとれ  
ます。  
**押し当てすぎに注意して  
ください。**

## BD シュアパス™ 法 (BD シュアパス™ コレクションバイアル)

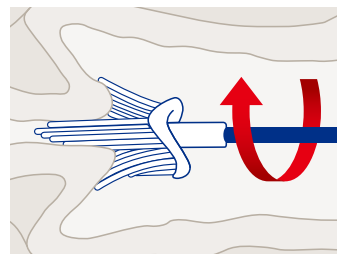

サーベックスブラシ™ の肩部を子  
宮口に**軽く**押し当ててから**時計方  
向に 5 回転**させてください。



開口部端に先端を引っかけて柄を  
引き抜いてください。

※エンドサーベックスブラシ™ は蓋ではさんで柄を  
引き抜いてください



蓋をしっかりと締めて提出してくだ  
さい。

## 直接塗抹法 (コンベンショナル)



サーベックスブラシ™ または  
サーベックスブラシ™ コンビ



エンドサーベックスブラシ™

ブラシ両面をすばやく均一に塗抹します。  
乾燥しないように注意してください



〈スプレー乾燥固定例〉



〈アルコール固定定例〉

提出先の固定方法に従って固定し、提出してください。

※弊社では固定用スプレー、輸送用スライド容器、アルコール固定容器等は取扱っておりません



※サーベックスブラシの商標は Rovers Medical Devices, B.V. が保有します。  
※BD、BDロゴおよびその他の商標は Becton, Dickinson and Company が保有します。©2014 BD

製造販売元

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

〒960-2152 福島県福島市土船字五反田1番地

本社：〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ

www.bd.com/jp/

◆ご注文・納期・在庫・製品関連・資料請求のお問い合わせ  
カスタマーサービス

☎ 0120-8555-90

FAX : 024-593-3281

45-007-02  
R0-1401-005-046